

Fauteuil Roulant BREEZY 90

Réf : **SBR90-10**

Configuration standard

- Revêtement du siège avec tissu double en nylon
- Roue à rayons pneumatiques de 24" ou roue pleine de 12"
- Roulette avant pleine de 8" x 1,25"
- Repose-pieds standard détachable
- Platine de pied en composite divisée avec boucle pour talon
- Accoudoirs rabattables avec repose-bras incurvé
- Assistance au basculement, pompe à air et kit d'outils inclus
- Cadre de couleur grise



Surmontez vos attentes

Le fauteuil roulant Breezy 90 offre une grande robusté grâce à son siège double en nylon renforcé et son cadre solide en acier. L'assise résistante assure une durabilité optimale, tandis que les accoudoirs incurvés et la longueur réglable des repose-jambes garantissent un confort accru à l'utilisateur. De plus, les poignées d'aide au basculement, la pompe à air, le kit d'outils et le dossier rembourré équipé d'une poche arrière sont tous inclus en standard. Ne choisissez plus, optez pour la qualité !




Protections latérales relevables au design attrayant et aux accoudoirs incurvés pour un confort accru.



Système pratique de réglage de la longueur des jambes par molette. Repose-pieds avec repose-pieds pliables en composite et boucle de talon.



Dossier en nylon recouvrant les tubes du dossier pour un confort accru, avec poche arrière.

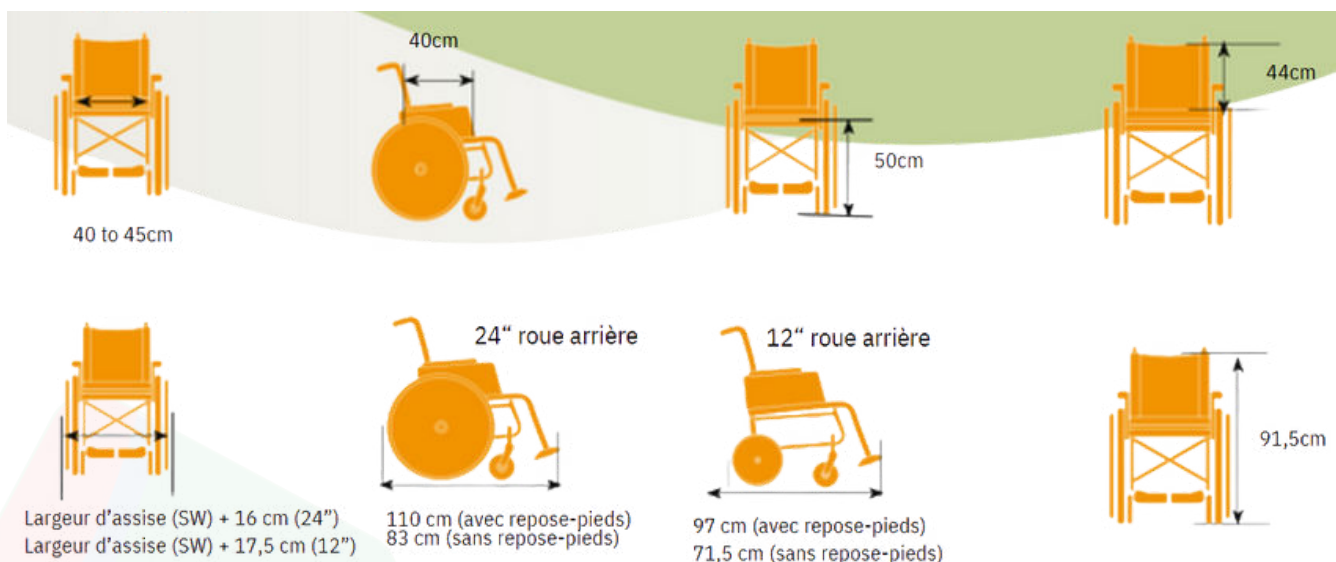

Spécifications Techniques:

Largeur d'assise:	40 / 45cm	Couleur du cadre : Gris
Profondeur d'assise	40cm	Couleur de l'assise : Noir
Hauteur d'assise:	50cm	Longueur des jambes : 37 à 46 cm (réglable)
Hauteur dossier:	44cm	Poids utilisateur autorisé : 125 kg
Largeur totale:	Largeur d'assise + 16 cm (roues 24")	Poids total :* 19,45 kg (roues 24"), 15,80 kg (roues 12")
Largeur totale:	Largeur d'assise + 17,5cm (roues 12")	Poids de la partie la plus lourde : 17,65 kg (24"), 14 kg (12")
Longueur totale:	110cm (24"), 97cm (12")	Largeur pliée : 26,5 cm (roues 24"), 28 cm (roues 12")
Hauteur totale :	91,5cm	

Configuration standard, largeur d'assise 40 cm
**Sans repose-pieds.

Tolerance: +/- 1cm

adamed
Santé & Confort